

Руководство пользователя

Косметическая маска для фототерапии



LANIQUE LQ-20

Указания по безопасности:

1. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.
2. Проверьте на работоспособность и безопасность устройство.
3. Беременные и планирующие беременность лица, кормящие матери.
4. Лица со светочувствительностью или принимающие любые светочувствительные лекарственные средства.
5. Лица с воспалением глаз или заболеваниями кожи (например, эритематозной волчанкой, светочувствительной экземой или альбинизмом).

Тест на светочувствительность:

Перед первым использованием данного изделия проведите тест на светочувствительность.

1. Поместите устройство на руку, включите и освещайте её в течение 10 минут. Появление таких симптомов, как покраснение или зуд, означает потенциально светочувствительную кожу. Рекомендуется прекратить использование, и перед последующим использованием проконсультироваться с дерматологом.
2. Перед использованием очистите и высушите кожу лица (без макияжа) для снятия косметики, которая может содержать светочувствительные ингредиенты, способные повлиять на здоровье кожи.
3. После использования может возникнуть покраснение кожи, что является нормальной реакцией кожи. Эти симптомы исчезнут в течение 1-2 часов. При возникновении ощущения жжения или любого другого дискомфорта во время использования немедленно прекратите использование.


Обслуживание и чистка изделия:

Хранение: храните данное изделие при комнатной температуре в сухой среде, не допуская воздействия пыли, прямых солнечных лучей или влажности.

Чистка: перед использованием и после окончания использования косметическую маску можно протереть тканью, смоченной в воде, или влажной салфеткой. Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено и отключено от источника питания.

Переработка и утилизация: данное изделие содержит литиевые аккумуляторы. Передайте его в местный специализированный пункт сбора для переработки и утилизации. Рекомендуется отделять изделие от прочего бытового мусора и перерабатывать его отдельно для вклада в защиту окружающей среды.

Комплект поставки:

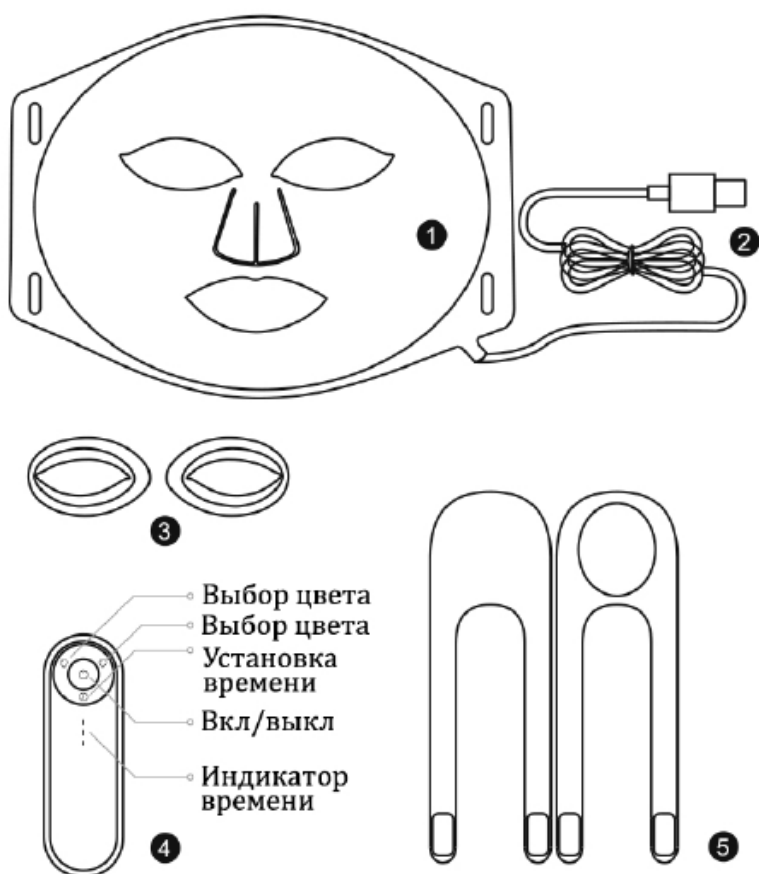

- ❶ Гибкая силиконовая маска
- ❷ Кабель Type-C для зарядки
- ❸ Накладки на глаза
- ❹ Проводной пульт управления
- ❺ Ремешки для фиксации

*Изображения могут отличаться от настоящих аксессуаров.


Краткое руководство:



Шаг 1: вымойте и высушите кожу лица.



Шаг 2: присоедините и отрегулируйте ремешки, наденьте маску, нажмите и удерживайте 1,5 с кнопку вкл/выкл для включения. По умолчанию свет красный.

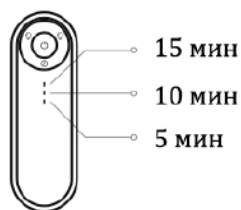

Шаг 3: устройство имеет три интервала времени - 15, 10 и 5 минут. По умолчанию 5 минут. Для переключения интервалов нажимайте на кнопку.



Шаг 4: по истечении заданного времени устройство выключится автоматически, снимите маску и проведите последующий уход за кожей.

Способ применения:

Порядок использования

- Шаг 1: тщательно вымойте и высушите кожу лица.
- Шаг 2: присоедините ремешки к маске, наденьте маску на лицо, отрегулируйте и зафиксируйте ремешки для надёжной фиксации маски, нажмите и удерживайте кнопку питания для включения устройства.
- Шаг 3: возможно переключения цвета света при помощи краткого нажатия на кнопку выбора цвета. По умолчанию при включении устройства включается красный свет, время свечения которого можно выбрать путем нажатия кнопки установки времени. Три мигающих индикатора показывают, что аккумулятор устройства разряжен. В этом случае его следует зарядить.
- Шаг 4: устройство автоматически выключится по истечению заданного интервала времени. После выключения снимите маску и завершите процедуру. Проведите ежедневный уход за кожей.

Примечание: рекомендуемая частота использования: 3-5 раз в неделю курсом продолжительностью 4 недели.

Технические характеристики:

Наименование изделия: косметическая маска для фототерапии

Модель изделия: LQ-20

Входное напряжение: 5 В = 0,5 А

Выходное напряжение: 3,7 В

Рабочая мощность: 3 Вт

Гарантийный талон

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	

Гарантийные обязательства

Предприятие поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование вышедшего из строя в следствии:

- Механическое повреждение устройства
- Не соблюдение или нарушение Правил эксплуатации, транспортировки и хранения
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов (песка, насекомых и т.д.), влаги.
- Применения в изделии некачественных элементов питания

Изделие лишается гарантии в случае, если:

- Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки или модификации изделия
- Нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.
- Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, элементы крепления.
- Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным предприятием- изготовителем.

Обращения по телефону: 8-968-400-40-69 пн-пт (с 10:00 до 19:00)

Обращения на почту: info@lanique.ru

Изготовитель: Shanghai GESS Fitness Equipment Co., Ltd
Адрес: 1st Floor, B building No. 2163 Wanyuan rd.
Minhang district, Shanghai, China PC: 201100, Китай

Импортер в РФ:

ООО «КРИТ»

119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26