


Руководство пользователя

Массажер вакуумный

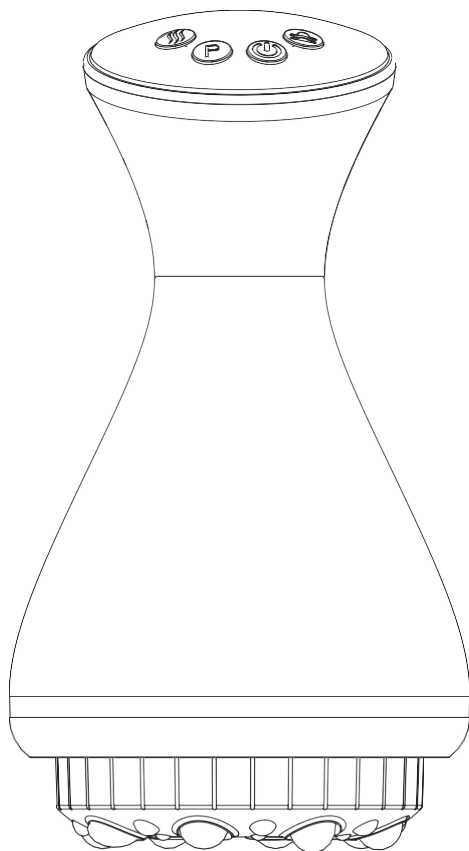


LANIQUE LQ-17

Благодарим вас за выбор устройства для мышечной терапии нашей компании. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство пользователя и уделите особое внимание мерам предосторожности для правильного использования данного изделия.

Технические характеристики

- Наименование изделия: массажер вакуумный
- Модель изделия: LQ-17
- Номинальная мощность: 12 Вт
- Номинальное напряжение: 5 В
- Стандарт исполнения: GB4706.6.1-2005 GB4706.10-2008

Способ применения

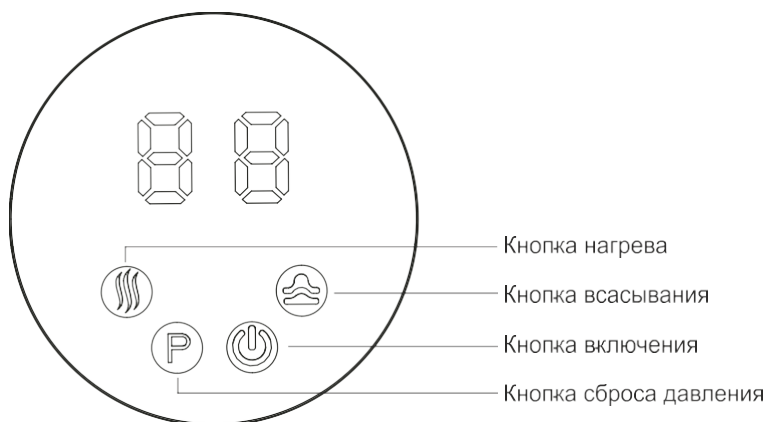

1. Нанесите ароматическое масло на чистую кожу и дайте ему впитаться в течение 2 минут.
2. Для включения устройства в режим ожидания нажмите и удерживайте кнопку включения, загорится индикатор.
3. В режиме ожидания можно отрегулировать необходимый уровень нагрева и силу всасывания.
4. Нажмите кнопку нагрева для включения красного света и нагрева. Устройство имеет 15 уровней нагрева, чем больше значение - тем выше температура. Уровни переключаются по очереди от 1 до 15.
5. Нажмите кнопку всасывания для включения всасывания. Устройство имеет 15 уровней силы всасывания, чем больше значение - тем выше сила. Уровни переключаются по очереди от 1 до 15.
6. Устройство имеет кнопку сброса давления. При её нажатии давление немедленно возвращается к исходной величине.
7. По окончании использования устройства нажмите кнопку включения для прекращения работы. Дайте устройству

остыть 3 минуты, затем при помощи комплектного инструмента извлеките ограничительный винт, вращая его против часовой стрелки. Снимите массажную головку для очистки. Почистив, навинтите головку обратно по часовой стрелке и закрепите её. Держите устройство в чистоте и храните в сухом затененном месте. Во время зарядки срабатывает защитная функция устройства, не позволяющая пользоваться им во время зарядки. Через 15 минут работы устройство автоматически выключается. Во время зарядки на дисплее отображается «L», после полной зарядки аккумулятора отображается «F».

Извлечение аккумулятора: отключите от источника питания, дайте устройству поработать до полного разряда аккумулятора. Откройте переднюю крышку со стороны кнопок, снимите массажную головку, а затем удалите винты изделия для извлечения аккумулятора.

Внимание!

Меры предосторожности во время зарядки устройства: используйте адаптер 5 В/1 А и держите его вдали от горючих материалов, таких как деревянные предметы, хлопковые ткани, изделия из бумаги и другие горючие и взрывоопасные вещества. Неправильное обращение с зарядным устройством может привести к выходу изделия из строя.

Меры предосторожности:

1. При варикозном расширении вен запрещается пользоваться устройством.
2. Использование устройства следует отложить на время беременности и менструации.
3. Не рекомендуется пользоваться устройством после приема пищи, поскольку кровь концентрируется в пищеварительной системе.
4. После использования поверхностные кровеносные сосуды кожи расширяются, избегайте холодного воздуха, не принимайте ванну и находитесь в тепле.
5. Во время использования перемещайте устройство в одном

- направлении, избегайте попеременного перемещения вверх-вниз и влево-вправо.
6. Вследствие приложения отрицательного давления рекомендуется использовать устройство не чаще, чем раз в несколько дней.
 7. Устройство имеет нагревательную поверхность. Нечувствительным к теплу лицам следует пользоваться изделием с осторожностью.
 8. Не следует чрезмерно массажировать одну и ту же область тела, задерживать устройство в одной точке дольше 1 минуты. При возникновении любого дискомфорта немедленно прекратите использование.
 9. Во время зарядки изделия держите его вдали от горючих и взрывоопасных предметов.
 10. Изделие рекомендовано для индивидуального применения. При совместном использовании несколькими людьми перед каждым применением очищайте массажную головку дезинфицирующим средством.
 11. Детям категорически запрещается пользоваться устройством. Лица с особыми потребностями должны пользоваться устройством под присмотром взрослых.
 12. Категорически запрещается разбирать устройство самостоятельно. Любые неисправности или опасности, возникающие в результате, не покрываются гарантией, а изготовитель не несет ответственность за любые негативные последствия.

Уход за устройством

- После каждого использования следует почистить поверхность устройства.
- При чистке питание должно быть выключено.
- Въевшиеся пятна можно удалить губкой или тканью, смоченной разбавленным нейтральным моющим средством.
- Не пользуйтесь концентрированными щелочными, спиртовыми средствами или полиролями.
- Устройство не является водонепроницаемым.
- Устройство и адаптер питания не следует помещать в воду или споласкивать водой.

Противопоказания

Противопоказаниями являются следующие состояния или заболевания:

- Кожные заболевания или аллергия
- Беременность или менструация
- Заболевания сердца
- Отклонения артериального давления
- Остеопороз
- Злокачественные опухоли
- Заболевания сосудов головного мозга
- Искривления или заболевания позвоночника
- Медицинские импланты
- Неврологические заболевания
- Острые гнойные воспаления
- Гемофилия

Обязательная консультация с врачом перед началом использования во избежание несчастных случаев или дискомфорта при наличии:

- Диабет
- Нечувствительность к теплу
- Прохождение медицинского лечения
- Плохое самочувствие
- Температура тела выше 38 градусов
- Инфекционные заболевания
- Прием лекарственных препаратов
- Аллергия на металлы
- Нарушение ощущений на коже
- Кожные патологии

Гарантийный талон

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	

Гарантийные обязательства

Предприятие поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование вышедшего из строя в следствии:

- Механическое повреждение устройства
- Не соблюдение или нарушение Правил эксплуатации, транспортировки и хранения
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов (песка, насекомых и т.д.), влаги.
- Применения в изделии некачественных элементов питания

Изделие лишается гарантии в случае, если:

- Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки или модификации изделия
- Нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.
- Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, элементы крепления.
- Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным предприятием- изготовителем.

Обращения по телефону: 8-968-400-40-69 пн-пт (с 10:00 до 19:00)

Обращения на почту: info@lanique.ru

Изготовитель: Shanghai GESS Fitness Equipment Co., Ltd
Адрес: 1st Floor, B building No. 2163 Wanyuan rd.,
Minhang district, Shanghai, China PC: 201100, Китай

Импортер в РФ:

ООО «КРИТ»

119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26