


Руководство пользователя

Ультразвуковой скраббер для кожи

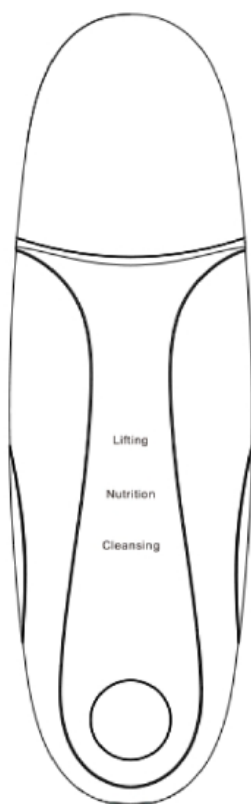

LANIQUE LQ-25

Благодарим за приобретение данного изделия! Для правильного использования изделия перед началом работы прочитайте настоящее руководство. Храните руководство в надёжном месте для того, чтобы иметь возможность прочитать его в любое время, когда оно вам понадобится.

О данном руководстве:

Изображения изделия и его характеристики в данном руководстве, а также некоторые сведения могут использоваться только в справочных целях. Пользователю следует отдавать предпочтение реальному изделию, а в основе технических характеристик лежат результаты лабораторных испытаний.

Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомьтесь с мерами предосторожности.

Пользуйтесь данным изделием правильно в соответствии с содержанием и рекомендациями руководства.

Изделие следует своевременно чистить после использования во избежание скопления жира и его остатков.

 Опасно	Значение: неверные действия могут привести к травме.
 Осторожно	Значение: неверные действия могут привести к травме или имущественному ущербу.

Опасно:

- Для зарядки используйте комплектный кабель для зарядки и зарядное устройство, соответствующее требованиям изделия. Правильно подключайте вилку зарядного устройства к бытовой розетке во избежание выхода из строя и возгорания из-за перегрева.
- Поскольку в изделие встроен аккумулятор, не бросайте его в огонь и не используйте в условиях высоких температур — это может привести к выходу из строя из-за перегрева.

- Если изделие деформировано, повреждено или имеет неприятный запах, не пользуйтесь им во избежание риска поражения электрическим током и возгорания.

Осторожно:

- Во избежание опасности не пользуйтесь устройством одновременно с медицинским электронным оборудованием.
- Категорически запрещается использование лицом, перенесшим операцию на сердце, или имеющим медицинское электронное устройство, такое как имплантированный кардиостимулятор или дефибриллятор.
- Не пользуйтесь изделием при наличии аллергии на металл.
- Во избежание выхода из строя не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию изделия самостоятельно.
- В случае повреждения устройства во избежание опасности ремонт должен выполнять изготовитель, его отдел технического обслуживания или специалист аналогичного отдела.
- Не пользуйтесь изделием вблизи горючих или взрывоопасных материалов (например, спирта, бензина, аэрозоля и пр.) — это может привести к пожару или взрыву.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с изделием.
- Храните упаковочные материалы, например, пластиковые пакеты, в недоступном для детей месте.
- Перед чисткой и обслуживанием отключите питание.
- В случае возникновения неисправностей во время использования выключите прибор и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
- Во избежание неисправностей не допускайте падения и ударов изделия.
- Во избежание неисправностей или возгорания из-за перегрева не используйте данное изделие в целях, отличных от указанных в данном руководстве.
- При аномальном нагреве изделия во время работы немедленно прекратите его использование и выключите во избежание ожогов. Не пользуйтесь неисправным устройством. Использование неисправного изделия может привести к

неблагоприятным последствиям для организма или другим опасностям.

- Не используйте на травмированных участках кожи.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с физическими, сенсорными или психическими недостатками, или не обладающими опытом и знаниями (включая детей), если только они не находятся под присмотром опекуна и не руководствуются правилами использования изделия или лицом, несущим ответственность за безопасность пользователя.
- Не храните этот продукт во влажной среде.
- Не пользуйтесь изделием в следующих случаях:
- Во время беременности, кормления грудью или менструации.
- При наличии аллергических проявлений на коже, воспаления кожи, раздражения кожи или при других кожных заболеваниях и при сильных солнечных ожогах.
 - При повреждённой коже, потливости, отеках и т.п.
 - На раннем этапе восстановления после операции.
 - При плохом самочувствии или жаре.
 - После употребления алкоголя или наркотиков.


Введение:

Это комплексное устройство, имеющее режимы очищения, питания и лифтинг массажа кожи – доступный персональный косметический инструмент для ухода за кожей. Его рекомендуется использовать вместе со средствами для ухода за кожей, такими как кремы и эссенции для получения научно-обоснованного и эффективного улучшения состояния кожи.

S-образные линии и двухцветная отделка корпуса подчёркивают атмосферу высокого класса. Устройство простое в работе, его легко носить с собой, оно подходит для домашнего ухода за кожей.

В устройстве используется передовая ультразвуковая технология, сильный эффект ультразвукового распыления, а звук устройства во время работы приятный и приглушенный.

Детали устройства

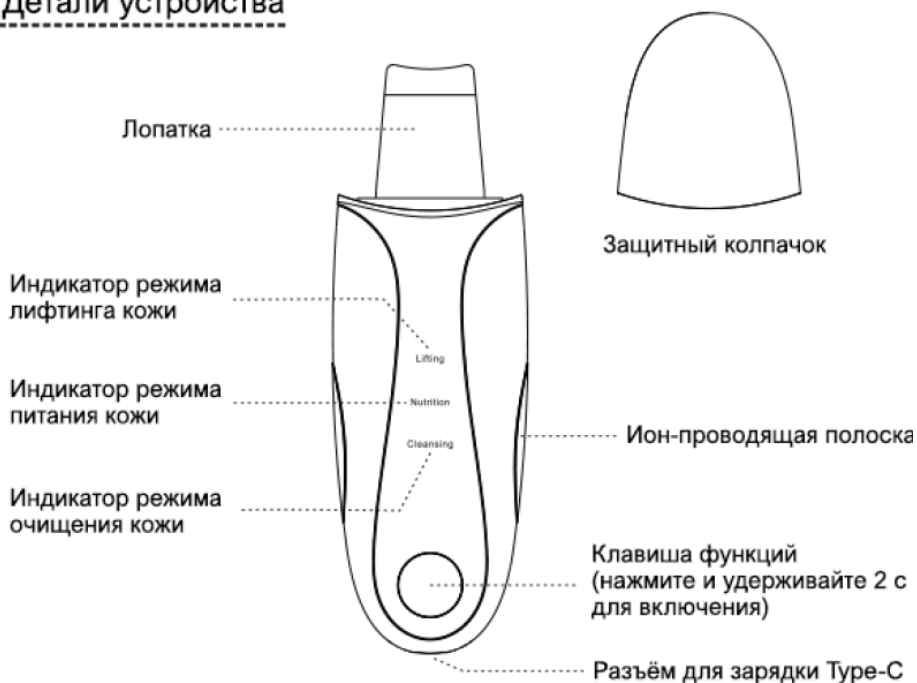

Способ применения

[Зарядка]

Перед первым использованием полностью зарядите устройство.

- Подключите изделие кабелем для зарядки к зарядному устройству, а зарядное устройство включите в розетку;
 - Во время зарядки индикатор зарядки мигает; после полной зарядки индикатор горит постоянно;
 - Время полной зарядки около 2,5 часов;
 - Время работы после полной зарядки около 50 минут.
- Примечание: во время зарядки убедитесь, что устройство выключено и сухое!

[Подготовка к использованию]

Подготовьте средства для ухода за кожей, такие как эфирная эссенция и средство для очищения кожи; как обычно снимите косметику; Протрите лопатку инструмента увлажнённым ватным диском.

[Очищение]

1. Нанесите на лицо средство для очищения кожи или смочите его водой.

2. Нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу для включения устройства, загорится индикатор «Cleansing».

Лопатка начнёт вибрировать - функция очищения включена.


3. Удерживая устройство в руке перемещайте лопатку (сгибом вверх) медленно вдоль области для очищения. При касании лопатки кожи вода будет разбрызгиваться (если кожа недостаточно влажная, необходимо смочить ее водой или средством для очищения). Грязь, жир и пр. будет вымываться из кожи водой.

(Примечание: рукой необходимо касаться ион-проводящей полоски для прохождения обратного тока).

4. Нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу для выключения.

5. Протрите лицо ватным диском или тканью, смоченной водой или средством для очищения кожи.

Рекомендация: проводить процедуру 2-3 раза в неделю, длительность процедуры не более 3 минут.

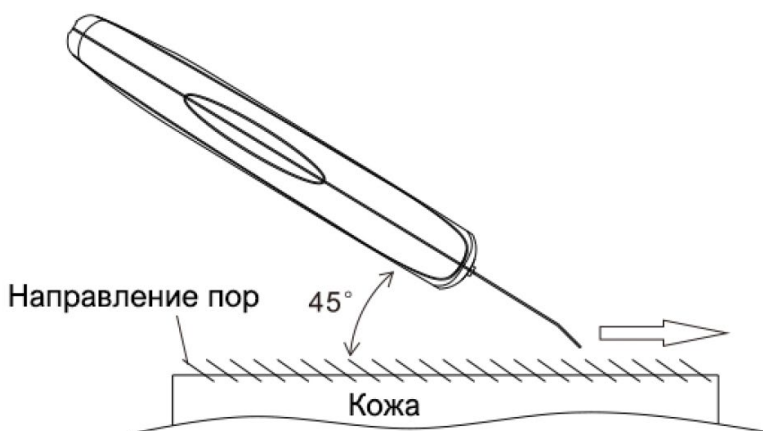

[Питание кожи]

Нанесите на лицо, шею и другие области для обработки достаточное количество косметического лосьона.


Выберите нужный вам режим ухода за кожей.

Режим питания: после включения нажмите клавишу функций один раз, загорится индикатор «Nutrition». Переверните лопатку (сгибом вниз как показано на рисунке).

Прикасайтесь к коже лопаткой устройства.

(Примечание: рукой необходимо касаться ион-проводящей полоски для прохождения обратного тока).

Рекомендация: 2-3 раза в неделю, длительность процедуры не более 3 минут.

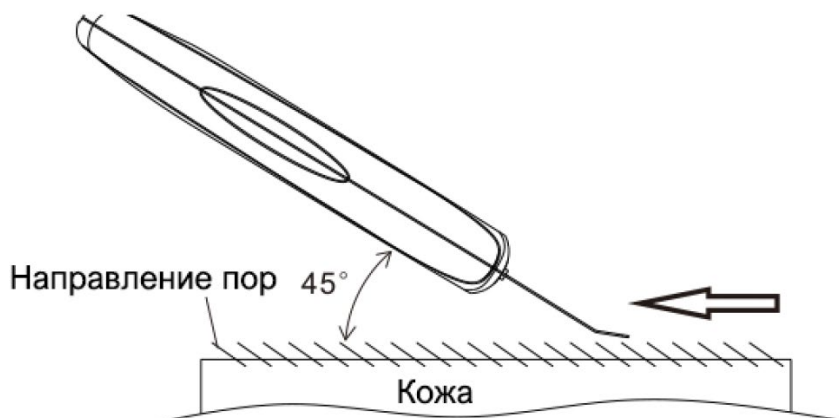

- При использовании следует наклонять лопатку под углом около 45 градусов к поверхности кожи.
- Не касайтесь изделием глаз, слизистых оболочек и пр.
- Необходимо производить уход за левой и правой половинами лица, задней части шеи, а также других частей тела.
- Не останавливайте движение устройства в одной точки лица, устройство следует постоянно не спеша перемещать.
- После завершения ухода нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу для выключения.
- Если после завершения ухода на лице остались остатки средства для питания кожи, их можно стереть или смыть.

Устранение неисправностей:

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы устройство неожиданно выключается	Аккумулятор не заряжен полностью	Полностью зарядите устройство и включите снова
	Аккумулятор исчерпал свой срок службы	Свяжитесь с сервисным центром для замены и ремонта
Во время зарядки индикатор заряда не загорается	Плохой контакт в разъеме устройства	Повторно присоедините зарядное устройство
	Устройство переходит в режим ожидания	Обычно аккумулятор требует зарядки спустя 6-30 минут работы. Перед использованием полностью зарядите устройство
Отсутствует функция ультразвука лопатки	Обрыв проводов внутри устройства	Свяжитесь с сервисным центром для замены и ремонта
	Лопатка деформирована	Свяжитесь с сервисным центром для замены и ремонта
Устройство не включается	Аккумулятор разряжен	Полностью зарядите устройство и включите снова
Если устройство всё равно работает неправильно, прекратите его использование и свяжитесь с сервисным центром		

Обслуживание:

- Выключайте устройство перед чисткой.
- Берегите устройство от воздействия влаги и не кладите его в посудомоечную машину или микроволновую печь.
- Устройство не следует споласкивать водой. Его можно почистить мягкой влажной тканью и протереть мягкой сухой тканью.
- Для чистки не пользуйтесь острыми предметами или коррозионными летучими разбавителями.
- Не встряхивайте лопатку из нержавеющей стали и не проверяйте ее рукой во время чистки.

Технические характеристики:

Наименование изделия: ультразвуковой скраббер для кожи

Модель устройства: LQ-25

Рабочее напряжение: 3,7 В

Напряжение зарядки: 5В 1А

Номинальная мощность: 2.0 Вт

Вес брутто: 210 г

Вес нетто: 90 г

Емкость аккумулятора: 500 мАч

Время зарядки: 2,5 ч

Время работы: 50 мин

Размеры изделия: 180x55x18,5 мм

Размер упаковки: 207x85x32 мм

Комплект поставки: устройство – 1шт, кабель для зарядки Type-C – 1шт, руководство – 1шт.

Гарантийный талон

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	

Гарантийные обязательства

Предприятие поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование вышедшего из строя в следствии:

- Механическое повреждение устройства
- Не соблюдение или нарушение Правил эксплуатации, транспортировки и хранения
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов (песка, насекомых и т.д.), влаги.
- Применения в изделии некачественных элементов питания

Изделие лишается гарантии в случае, если:

- Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки или модификации изделия
- Нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.
- Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, элементы крепления.
- Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным предприятием- изготовителем.

Обращения по телефону: 8-968-400-40-69 пн-пт (с 10:00 до 19:00)

Обращения на почту: info@lanique.ru

Изготовитель: Shanghai GESS Fitness Equipment Co., Ltd
Адрес: 1st Floor, B building No. 2163 Wanyuan rd.
Minhang district, Shanghai, China PC: 201100, Китай

Импортер в РФ:

ООО «КРИТ»

119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26