

Руководство пользователя

Косметологический инструмент
для 7-цветной фототерапии лица и шеи



LANIQUE LQ-03

Краткое описание функций:

Косметологический инструмент для 7-цветной фототерапии лица и шеи – это безрецептурное портативное устройство для разглаживания морщин кожи лица. Оно сочетает в себе светодиодную 7-цветную фототерапию, вибрацию и нагрев для более эффективного устранения морщин и иных проблем кожи.

А. Вибрация

Устройство имеет 3 режима массажа с разными уровнями интенсивности. Режим CLEAN позволяет очищать поры и поддерживать чистоту и сияние вашей кожи.

Режим EMS расслабляет кожу, способствует впитыванию кожей средств для ухода и сокращает тонкие линии и морщины.

Режим HOT способствует подтяжке утратившей упругость кожи и способствует выработке коллагена, таким образом омолаживая вашу кожу.

В. Нагрев

Постоянная температура $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ во время процедуры способствует поглощению средств для ухода за кожей. Такая температура делает процедуру приятнее и полезнее для кожи.

С. 7-цветная светодиодная фототерапия

КРАСНЫЙ СВЕТ (630 нм) – антивозрастное воздействие и стимуляция выработки коллагена.

СИНИЙ СВЕТ (415 нм) – уменьшает воспаление и успокаивает чувствительную кожу.

ЗЕЛЕНый СВЕТ (525 нм) – разглаживает морщины и тонкие линии.

ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ (390 нм) – способствует лимфодренажу.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ (590 нм) – уменьшает выработку меланина.

БИРЮЗОВЫЙ СВЕТ (490 нм) – уменьшает отечность кожи и суживает капилляры.

БЕЛЫЙ СВЕТ (смесь цветов) – расслабляет кожу, ускоряет рост и оздоравливает клетки кожи.

Компоненты изделия:





Способ применения:

1. После умывания нанесите на лицо предпочитаемые средства для ухода за кожей.
2. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку включения для включения устройства.
3. Нажимайте на кнопку для выбора желаемой функции фототерапии или массажа.
4. Приложите массажную головку к коже и массируйте движениями снизу вверх.
5. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку включения для выключения устройства.

Примечания:

1. Устройством нельзя пользоваться во время его зарядки.
2. Массажную головку необходимо прикладывать к коже до того, как она начнет вибрировать.
3. В отсутствии нажатия кнопок в течении одной минуты устройство автоматически выключается.

Советы по использованию

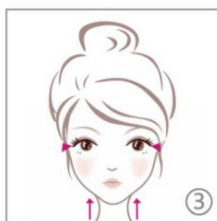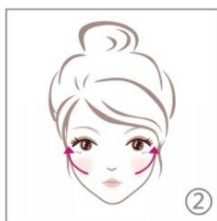

1. Массажируйте от подбородка к щекам.
2. Массажируйте от щек к внешним уголкам глаз.
3. Массажируйте от шеи к подбородку.
4. Массажируйте лоб снизу вверх.

Меры предосторожности

1. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.
2. В общем случае не рекомендуется лицам, перенесшим пластическую операцию на лице, имеющим подкожные импланты, а также беременным женщинам и женщинам во время менструации.
3. После использования оботрите массажную головку салфеткой или тканью. Не мойте ее водой.
4. Не храните в ванной и в других влажных местах, поскольку это легко может привести к короткому замыканию.
5. Не используйте коррозионные растворы (спирт, банановую эссенцию, бензин, жидкость для снятия лака и пр.) для протирания устройства, что может привести к выходу изделия из строя или появлению трещин, обесцвечиванию деталей и пр.
6. Каждый режим может использоваться только раз в день. Рекомендуется ежедневно использовать последовательно три режима устройства.

Технические характеристики:

Наименование: косметологический инструмент для 7-цветной фототерапии лица и шеи

- Модель изделия: LQ-03
- Рабочая мощность: 5 В = 1А
- Номинальная мощность: 2,5 Вт
- Модель аккумулятора: 602535
- Параметры аккумулятора: 3,7 В / 500 мАч
- Время зарядки: 2 часа
- Размеры изделия: 133x76x32 мм
- Стандарт исполнения: GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008
- Энергосбережение: Переход в режим ожидания через 4 минуты, затем автоматическое выключение через 1 минуту в отсутствии действий.

Гарантийный талон

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	

Гарантийные обязательства

Предприятие поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование вышедшего из строя в следствии:

- Механическое повреждение устройства
- Не соблюдение или нарушение Правил эксплуатации, транспортировки и хранения
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов (песка, насекомых и т.д.), влаги.
- Применения в изделии некачественных элементов питания

Изделие лишается гарантии в случае, если:

- Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки или модификации изделия
- Нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.
- Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, элементы крепления.
- Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным предприятием- изготовителем.

Обращения по телефону: 8-968-400-40-69 пн-пт (с 10:00 до 19:00)

Обращения на почту: info@lanique.ru

Изготовитель: Shanghai GESS Fitness Equipment Co., Ltd
Адрес: 1st Floor, B building No. 2163 Wanyuan rd.
Minhang district, Shanghai, China PC: 201100, Китай

Импортер в РФ:

ООО «КРИТ»

119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26