

Руководство пользователя




LANIQUE LQ-15 PRO

Введение:

Косметологический инструмент для корректировки овала лица – это портативное устройство, дающее эффект профессионального косметического инструмента. Устройство имеет шесть режимов, в том числе фототерапии, при котором свет проникает в глубокие слои кожи, увлажняя и замедляя старение кожи. Благодаря режиму вибрации устройство подтягивает контуры лица, улучшая его объемный овал, и при этом способствует укреплению сухожилий мельчайших мышц для улучшения циркуляции крови, что способствует восстановлению и поддержанию эластичности кожи так, чтобы питательные вещества с поверхности кожи проникали в глубокие слои дермы. Дает приятное ощущение от корректировки овала лица благодаря различным режимам СПА-массажа. Перед первым использованием косметологического инструмента для коррекции овала лица прочтите и уясните содержимое руководства по эксплуатации, меры предосторожности, а также сведения о безопасности при работе с устройством, способы применения устройства.

Внешний вид устройства:

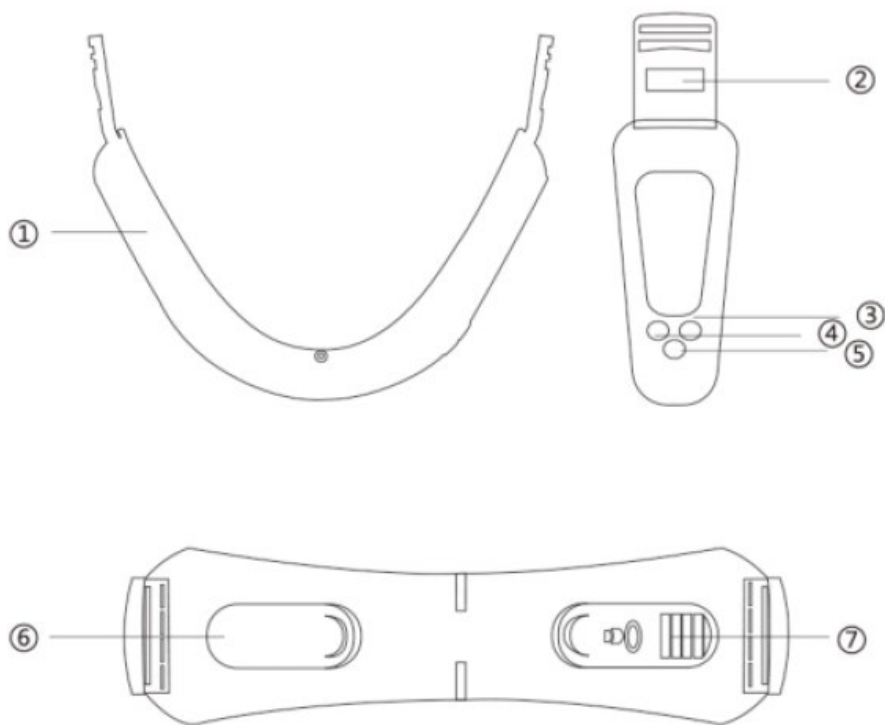

① Разъём для зарядки Type-C

② Карабин банджа

③ Дисплей

④ Кнопка режима

⑤ Кнопка вкл/выкл

⑥ Левая нагревающаяся подушка ⑦ Правая нагревающаяся подушка

Способ применения:



1 Для использования косметологического инструмента для коррекции овала лица наденьте устройство так, чтобы оно плотно охватывало лицо. Низ устройства (у подбородка) оснащено подтягивающим устройством, таким образом можно отрегулировать положение инструмента по форме вашего лица так, чтобы оно как можно плотнее прилегало к коже.



2 Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения для включения/выключения устройства. Кнопки **[+]** и **[-]** служат для регулировки интенсивности.



3 Устройство имеет шесть режимов: циклический, подтяжки овала лица, низкочастотной магнитотерапии, очищения, избавления от акне и фотоомоложения. Нажимайте кнопку «М» для переключения на следующий режим, режимы переключаются по порядку.

Описание функций:

1. Кнопка вкл/выкл: нажимайте и удерживайте 1,5 с каждое нажатие для переключения интенсивности
2. Кнопка режима: переключения режимов (всего шесть режимов)
 3. Режим 1: циклический режим.
Режим 2: ЭМС-подтяжка овала лица (функция пощипывания) + красный свет + вибрация.
Режим 3: низкочастотная ЭМС магнитотерапия (функция скрапа) + синий свет + вибрация.
Режим 4: синий свет для очищения и уменьшения отечности+ ЭМС (функция постукивания) + вибрация с нагревом до 45 градусов.
Режим 5: избавление от акне + ЭМС-конкурирование (функция массажа) красный свет + вибрация + нагрев до 4 - 5 градусов.
Режим 6: фотоомоложение синим светом + ЭМС (функция иглотерапии) + вибрация.
4. Автоматическое выключение через 3 минуты.
Автоматическое прекращение работы через 15 минут.
5. Красный индикатор разряда аккумулятора, постоянно горит после полного заряда.
6. Функция напоминания о разряде аккумулятора - индикатор мигает 5 раз, после чего устройство автоматически выключается.
7. По умолчанию каждый режим имеет свою интенсивность, настройки которой сохраняются при выключении устройства.

Частота и продолжительность применения:

Каждый режим рассчитан на 15 минут, через 15 минут устройство автоматически прекращает работу и запоминает последнее время работы. Для продолжения работы перезапустите изделие и выберите режим.

Для наилучшего результата рекомендуется пользоваться регулярно 2-3 раза в неделю.

Чистка и обслуживание:

Для лучшей сохранности устройства рекомендуется регулярно чистить его, обращая особое внимание на места касания кожи.

1. После использования устройства полностью выключите питание. Протрите устройство сухой салфеткой или сильно отжатой от воды тканью.
2. Не используйте для протирания спирт и иные легковоспламеняющиеся жидкости (в том числе одеколон, дезинфицирующие или другие спиртосодержащие вещества), ацетон и другие химикаты.
3. Если изделием не пользуются дольше семи дней, отсоедините зарядное устройство и кабель для зарядки и обязательно выключите питание для хранения устройства.
4. Если аккумулятор разряжен обязательно выключайте питание после подключения кабеля для зарядки устройства.

Не погружайте изделие или его зарядное устройство в воду!

Безопасное хранение и эксплуатация:

1. Запрещается использовать не по назначению.
2. Избыточное использование может привести к ожогу кожи. Рекомендуется прекратить использование при возникновении негативной реакции.
3. Запрещается использовать и хранить на кухне или в автомобиле и других местах с высокой температурой. Хранение в запыленных, задымленных местах и рядом с открытым пламенем приведёт к сокращению срока службы устройства.
4. Рекомендуется своевременно заряжать изделие во избежание сокращения срока службы изделия.
5. Не допускайте многократного падения устройства с высоты и сильных соударений с острыми предметами.
6. Запрещается разбирать или ремонтировать изделие самостоятельно.
7. Храните изделие в недоступном для детей месте.

Гарантийный талон

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	

Гарантийные обязательства

Предприятие поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование вышедшего из строя в следствии:

- Механическое повреждение устройства
- Не соблюдение или нарушение Правил эксплуатации, транспортировки и хранения
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов (песка, насекомых и т.д.), влаги.
- Применения в изделии некачественных элементов питания

Изделие лишается гарантии в случае, если:

- Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки или модификации изделия
- Нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.
- Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, элементы крепления.
- Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным предприятием- изготовителем.

Обращения по телефону: 8-968-400-40-69 пн-пт (с 10:00 до 19:00)

Обращения на почту: info@lanique.ru

Изготовитель: Shanghai GESS Fitness Equipment Co., Ltd
Адрес: 1st Floor, B building No. 2163 Wanyuan rd.
Minhang district, Shanghai, China PC: 201100, Китай

Импортер в РФ:

ООО «КРИТ»

119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26