


Руководство пользователя



LANIQUE LQ-50

Условные обозначение:

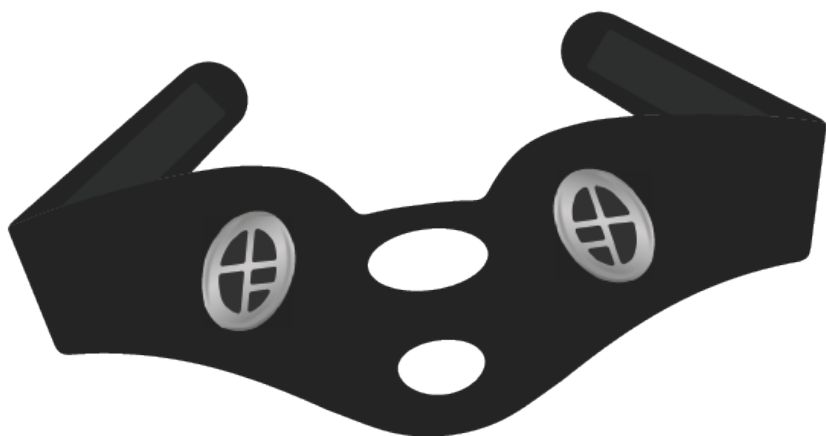

Указания по
применению



Не царапайте
изделие острыми
предметами



Химчистка
не разрешена



Нельзя гладить



Можно стирать
в стиральной машине



Литиевый
аккумулятор



Для правильного
и безопасного
использования
внимательно прочитайте
руководство



Можно стирать вручную



Нельзя
отбеливать



Нельзя сушить



Сушить в тени
(не на солнце)



Срок службы в целях
защиты окружающей
среды: 10 лет

Предосторожности перед использованием:

Противопоказания

1. Восстановление после пластических операций с хирургическими разрезами.
2. Такие расстройства, как светочувствительность, аллергия и пр.
3. Ношение другого медицинского электронного оборудования.
4. Травмы в результате несчастного случая.
5. Нагноение, воспаление кожи, акне, зуд и отёк.
6. Дети и лица с физическими ограничениями (главным образом,
7. лица с медицинскими имплантами).

Предосторожности перед использованием





1. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
2. Для безопасного использования ознакомьтесь с предостережениями руководства пользователя и соблюдайте их.
3. Перед использованием убедитесь, что изделие не имеет повреждений и исправно. При обнаружении неисправностей прекратите использование.
4. При возникновении дискомфорта во время использования прекратите использование и проконсультируйтесь с клиентской службой.
5. Использование неисправного устройства приведёт к нежелательным эффектам, прекратите использование устройства.
6. Если работоспособность устройства невозможно оценить невооружённым глазом, то перед использованием проконсультируйтесь с клиентской службой.
7. При первом использовании включайте устройство с минимальной интенсивностью. Если вы чувствуете боль, прекратите использование устройства.

Предосторожности перед использованием:

1. Во избежание несчастных случаев храните в недоступном для детей месте.
2. Во избежание неисправностей не кладите на продолжительное время во влажные места, такие как ванная комната.
3. Во избежание коррозии металлических поверхностей и плат высушивайте воду на изделии после использования.
4. Во избежание деформации деталей устройства не используйте нагревательные приборы, такие как фены, для сушки изделия.
5. Во избежание несчастного случая вследствие того, что данное изделие содержит встроенный литиевый аккумулятор, берегите устройство от открытого пламени и нагретых бытовых приборов.
6. Если устройство не используется, обязательно отключите источник питания, почистите изделие и храните его при комнатной температуре во избежание разряда аккумулятора.
7. Во избежание несчастных случаев во время зарядки изделия не касайтесь источника питания влажными руками.
8. Не используйте эмульсии, вместо этого для увлажнения кожи применяйте косметические средства, гели т.п.
9. Для протирания устройства не пользуйтесь спиртосодержащими моющими средствами, спиртовыми разбавителями, жидкостями для снятия лака на основе бензина и т.п.

Аксессуары:

- ① Изделие - 1 шт.
- ② Кабель USB для зарядки - 1 шт.
- ③ Руководство - 1 шт.
- ④ Маска

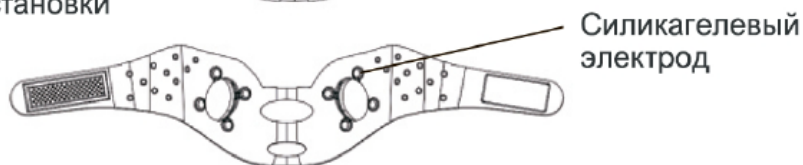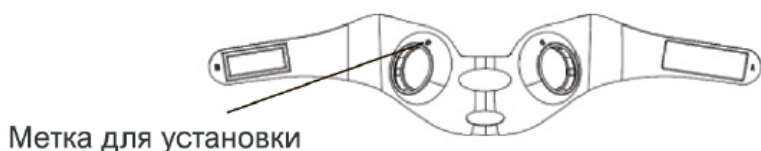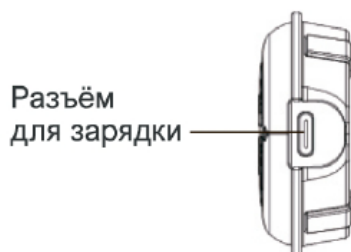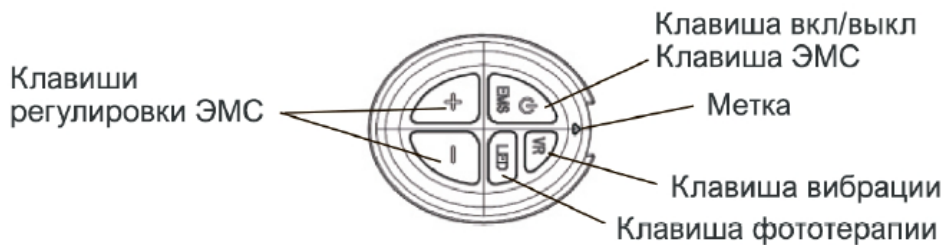


Способ зарядки:

- ① Открыв силиконовую маску, извлеките контроллер

Примечание: не прилагайте чрезмерных усилий, доставая контроллер, в противном случае можно повредить маску.

- ② После подключения зарядного устройства кабелем к контроллеру индикатор погаснет и загорится синим после полной зарядки.

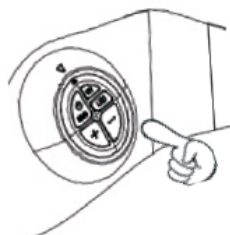

Установка контроллера

Метки на контроллерах



Метки на маске




Перед использованием:


- ① Совместив метку на контроллере с меткой на маске, вставьте контроллер в маску, переверните маску наизнанку и проверьте, не сместилась ли маска и электрическая плата.



- ② Переверните маску наизнанку и проверьте, не сместилась ли маска и электрическая плата, посмотрев, обращены ли вверх контакты питания слева и справа от контроллера.

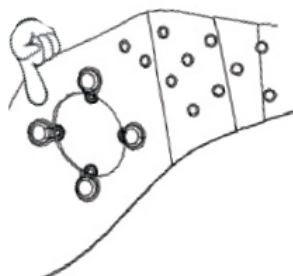

- ③ Примечание: при наличии капель воды на контроллере и на контактах сотрите их начисто перед использованием маски, в противном случае устройство может не работать.

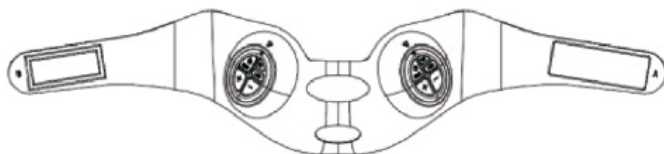


Порядок надевания:


Нанесите лосьон после снятия макияжа и вымойте лицо.

Используйте косметическое средство, гель и другие средства, чтобы полностью увлажнить кожу.

Примечание: во избежание несчастных случаев перед использованием устройства снимите с лица все металлические украшения.

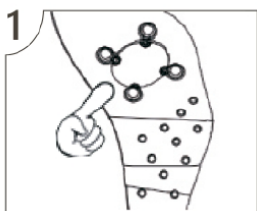

Вставьте контроллер согласно метке

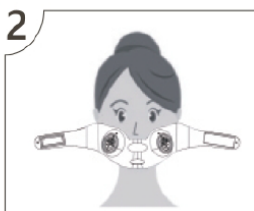

Переверните маску и поместите её на электроды. Закрепите её липучками, нанесите необходимое количество лосьона или геля. Очистив лицо, наденьте на него маску.



Закрепите крючком и кольцом.

Также можно использовать после нанесения маски.

Осторожно

1. В отсутствии влаги между ЭМС-маской и кожей энергия передаваться не будет, поддерживайте увлажненность лица.
2. Не используйте косметику на основе косметического жира. Это может привести к выходу устройства из строя.

Способ применения:

Клавиша ЭМС



1. Нажимайте и удерживайте более 2 секунд клавиши + и – для включения устройства.

По умолчанию после включения используется наименьший ток.

2. При каждом нажатии клавиши ЭМС переключается режим и меняется цвет света.

Режим коррекции овала лица (фиолетовый) - + режим массажа (синий) – режим скраба (красный) + режим имитации пощипывания (зеленый) – смешанный режим (желтый).

В отсутствии действий после включения каждые 5 минут звучит сигнал, долгий сигнал – через 10 минут. Автоматическое выключение.



3. Нажимайте клавиши +/- слева и справа на контроллере для выбора интенсивности ЭМС.
4. Нажмите и удерживайте дольше 2 секунд клавишу EMS для включения функции ЭМС.

Функция вибрации:


1. Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд клавишу EMS для включения устройства.
2. Нажмите клавишу VR для включения вибрации. ЭМС и вибрация работают одновременно.
3. Для переключения режима вибрации нажмите клавишу VR.



При нажатии клавиши VR индикатор будет мигать. Устройство имеет 2 режима вибрации.

Функция фототерапии:

1. Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд клавишу EMS для включения устройства.
2. Нажмите клавишу LED для включения фототерапии. Фототерапия и вибрация работают одновременно.
3. Нажмите клавишу LED еще раз для выключения функции фототерапии.

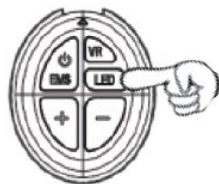

Обслуживание:

Порядок обслуживания

Для поддержания чистоты контроллера после использования регулярно проводите обслуживание, вынимая контроллер из маски.

Контроллер

1. Во время обслуживания обязательно отключайте источник питания во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания, возгорания.
2. Не мойте в воде. Изделие не является влагозащищённым. Мытье под струёй воды приведёт к выходу из строя.
3. Удаляйте пятна мягкой тканью, смоченной в воде, и высушивайте.
4. Если пятно удалить не удаётся, осторожно сотрите его тканью, смоченной нейтральным чистящим средством.
5. Заряжайте предварительно полностью высушенный контроллер.
6. Храните только полностью заряженное изделие, отключив кабель для зарядки.

Силиконовая маска

1. Сняв контроллер, почистите силиконовую маску водой. Если загрязнение не удаётся удалить, осторожно протрите её тканью, смоченной нейтральным чистящим средством.
2. Ещё раз протрите электроды сухой тканью, например, полотенцем, удалив капли воды и остатки конденсата.
3. Положите изделие в хорошо проветриваемое место для сушки.

Порядок хранения

1. После использования обязательно сотрите воду, храните изделие полностью высушенным.
2. Перед длительным хранением удалите воду с корпуса устройства.
3. Если изделие не используется, отключите питание и отсоедините кабель для зарядки от устройства и от сетевой розетки.
4. Не храните рядом с открытым пламенем, в местах с высокой температурой или влажностью, например на солнце, в ванной или в автомобиле. Храните в проветриваемом прохладном месте.

5. Храните в недоступном для детей месте.
6. При хранении вынимайте контроллер из силиконовой маски и храните его в недоступном для детей месте.

Аккумулятор

1. Аккумулятор является расходным материалом (на него не распространяется гарантия).
2. Даже при короткой зарядке срок службы аккумулятора сокращается (стандартное количество циклов зарядки - 100).
3. Срок службы аккумулятора в значительной степени зависит от условий эксплуатации и хранения.

Утилизация устройства

1. В данном изделии применяется литиевый аккумулятор.
2. При необходимости утилизации устройства делайте это согласно местным законам и правилам.

Гарантийный талон

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	

Гарантийные обязательства

Предприятие поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование вышедшего из строя в следствии:

- Механическое повреждение устройства
- Не соблюдение или нарушение Правил эксплуатации, транспортировки и хранения
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов (песка, насекомых и т.д.), влаги.
- Применения в изделии некачественных элементов питания

Изделие лишается гарантии в случае, если:

- Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки или модификации изделия
- Нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.
- Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, элементы крепления.
- Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным предприятием- изготовителем.

Обращения по телефону: 8-968-400-40-69 пн-пт (с 10:00 до 19:00)

Обращения на почту: info@lanique.ru

Изготовитель: Shanghai GESS Fitness Equipment Co., Ltd
Адрес: 1st Floor, B building No. 2163 Wanyuan rd.
Minhang district, Shanghai, China PC: 201100, Китай

Импортер в РФ:

ООО «КРИТ»

119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26